

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology




PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

Die Zirkonzahn Kultur

GESAMTSANIERUNG AUS PRETTAU® 2 DISPERSIVE® AUF JE VIER IMPLANTATEN

- Ausgangssituation:* Männlicher Patient mit weit fortgeschrittener Parodontitis im Ober- und Unterkiefer, unzureichender Mundhygiene sowie ausgeprägter Zahnarztphobie
- Patientenwunsch:* Komplettversorgung beider Kiefer unter Vollnarkose und in möglichst kurzer Zeit
- Realisierung:*
- Durchführung der Therapie unter Vollnarkose aufgrund massiver Zahnarztangst
 - Extraktion sämtlicher Restzähne im Ober- und Unterkiefer
 - Sofortige Insertion von jeweils vier Implantaten pro Kiefer nach dem All-on-4®-Protokoll (Nobel Biocare)
 - Optimierung der Implantatpositionen mit Zirkonzahn Multi Unit Abutments
 - Definitive Abformung und Bissregistrierung
 - Herstellung provisorischer Brücken aus Kunststoff Prime und Eingliederung im Patientenmund in derselben Sitzung
 - Design von Titanstegen und finalen Brücken für Ober- und Unterkiefer aus Prettau® 2 Dispersive®; anschließendes Fräsen mit dem Fräsgerät M2 Dual Double Teleskoper
 - Akzentuierung mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivfarben; Minimalverblendung mit Fresco Ceramics und Charakterisierung mit ICE Stains 3D by Enrico Steger
 - Definitive Eingliederung der steggestützten Zirkonversorgungen auf den Implantaten

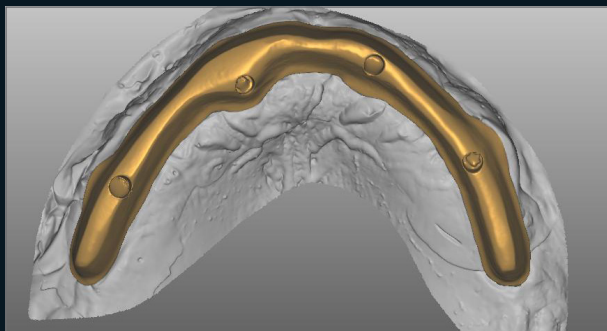

DIE ANGST BESIEGEN, DAS LÄCHELN ZURÜCKGEWINNEN

*Dr. med. dent. Roberto Sleiter – Dentalspecialist, Solothurn, Schweiz
ZT Vittorio Procopio – Montana Dental AG, Solothurn, Schweiz*





NEU! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Mit natürlichem Farbverlauf voreingefärbtes Zirkon mit besonders hoher Transluzenz und außerordentlicher Biegefestigkeit
- Keine Limitationen! Besonders geeignet für monolithische zirkuläre Brücken, aber auch für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Stege und mehrgliedrige Brücken verwendbar (reduziert oder monolithisch)
- Kein Keramikchipping (durch monolithische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Auf Wunsch patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv- oder Boost®-Farben, Keramik ICE Ceramics, Fresco Ceramics sowie Malfarben ICE Stains, ICE Stains Prettau® und ICE Stains 3D by Enrico Steger




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! TELESKOPER ORBIT SELFLOCK (Ø 125 mm)

ZUM AUTOMATISCHEN EIN- UND AUSSPANNEN VON BLANKS UND HOLDERN IN DEN DURCHMESSERN Ø 95, 98, 106 UND 125 mm

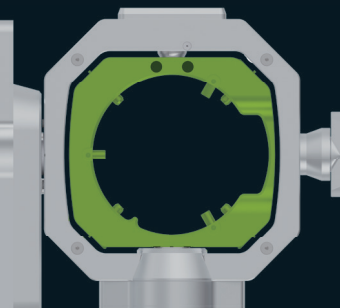

FRÄSGERÄT M6
TELESKOPER
BLANK CHANGER



Dieses Dokument ist für ein internationales Publikum bestimmt. Nicht alle darin genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Der Anwendungsbereich der einzelnen Produkte kann ebenfalls je nach Land variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihr Verkaufsteam, um dazu nähere Informationen zu erhalten.

© Zirkonzahn. Alle Rechte vorbehalten. Eine Vervielfältigung, Veröffentlichung, Weitergabe an Dritte oder anderweitige Nutzung der Inhalte – ganz oder in Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Zirkonzahn GmbH nicht gestattet. Version: 23.09.2025